

# dx compact **comfort**



## dx compact<sup>comfort</sup> - smidig, stark, komfortabel och...compact

DX Compact är med sitt minimala chassi med starka motorer och stora luftpumpade drivhjul idealisk för den som önskar en elrullstol för både inom- och utomhusbruk i samma. Den tar dig med lätthet direkt från köks- / arbetsbordet ut till en promenad med hunden eller en tur ned till affären. Den bekväma Comfortsitsen i skinn med stöd för hela kroppen gör att du sitter ergonomiskt hela dagen i DX Compact. Sitsen finns i 3 olika storlekar med låg eller hög rygg. Sitsdjupet är inställbart till hela 61 cm så även riktigt långbenta kan hitta en bekväm sittställning i DX Compact. Sitsfunktioner som ryggvinkling, tilt, sitslyft och benstöd kan beställas elektriskt inställbara. (elsitslyft är standard) Tack vare det lilla formatet och att ryggen går att snabbfälla kan man lätt ta med sig DX Compact i bagageutrymmet på en Combi bil. Den är dessutom krocktestad och godkänd som förarstol i bil tillsammans med Carosafe låset från Autoadapt.



Framhjulsdriften med de starka motorerna och de stora luftpumpade drivhjulen ger god framkomlighet. I Comfortsitsen sitter man länge utan att bli trött.



Det lilla och smala chassit gör att man lätt kan ta sig fram i sin bostad och i trånga affärer.




Snabbfällningen av ryggstödet gör att man lätt kan transportera rullstolen i bagageutrymmet på en bil av typ herrgårdsvagn.



elsitslyft



eltilt

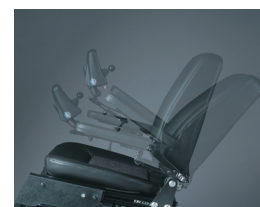

elrygg



elbenstöd

### Grundutförande:

- chassi - dx compact - framhjulsdrift
- hjul - framhjul luftpumpade - bakhjul - massiva
- comfortsits - 45 cm, siddjup 40-61 cm
- sitslyft - elektrisk
- ryggvinkling - manuell - gasassisterad
- sitstilt - manuell - ställskruv (engångsinställning)
- armstöd - mjuka - uppfällbara
- elektronik - Dynamic - G90T

### Tillbehör: (ett urval)

- comfortsits - 40 cm, 53 cm - låg rygg - 51 cm
- comfortsits - 45 cm - hög rygg - 64 cm
- sitstilt - elektrisk
- ryggvinkling - elektrisk
- benstöd - fotplatta
- benstöd - delade manuella eller elektriska
- nackstöd
- bålstöd
- lårstöd
- armstöd - extra mjuka
- grenkil
- bord
- benstöd - delade manuella eller elektriska
- alternativa styrningar, omgivningskontroll

### Tekniska data:

Klass	B
Hindertagning	65 mm
Drivning	framhjulen
Sits, storlekar Comfortsits	40, 45, 53 x 51 cm, låg rygg
Sits, storlekar Comfortsits	45 x 64 cm, hög rygg
Sits, djup -från rygg till sits framkant	40-61 cm
Sits, bredd- mellan armstöd	46-56 cm
Sits, höjd - till sitsens ovasida	45-63 cm,
Sits, tilt, elektrisk	-4° framåt till +16° bakåt
Rygg, vinkling elektrisk	4° framåt till -30° bakåt
Klädsel	skinn
Armstöd, höjd	10-30 cm
Armstöd, platta, storlek	31x8 cm
Totallängd - chassi	87 cm
Totalbredd - chassi	62 cm
Totalvikt	120 kg
Max brukarvikt	125 kg
Vändutrymme	117 cm
Max körtid	8,5 tim
Max hastighet	8 km/h
Elektronik	Dynamic G90T

