


soft air[®] plus wds

Grad IV (EPUAP)

Tryckavlastningssystem med växeltryck och stora celler för trycksårsprofylax och behandlingsstöd vid risk/grad IV (EPUAP)

- För brukare som väger 30–150 kg
- Finns också i XXL för brukare som väger upp till 200 kg
- Luftning enligt trekammarprincipen
- Individuellt tryck- och komfortreglage
- Möjlighet att välja mellan statiskt läge och växeltryck, vilket innebär att systemet kan användas vid olika sjukdomsbilder
- AVS (antivibrationssystem) som minimerar buller och vibrationer
- Energibesparande start/stopp-automatik
- Inställbara cykeltider
- Ljudlarm och optiskt larm
- Dyna
 - med 19 celler som går att plocka ur enskilt.
 - Mikroperforerade celler för behaglig ventilering
 - kan fixeras vid sängen.
 - ingen vårdmadrass krävs, eftersom systemet har ett madrassunderlag av skumplast.
- Nyutvecklad CPR förhindrar att ventilen öppnas oavsiktligt.
- Inkl. PU-överdrag med blixtlås runt hela, andningsaktivt, släpper ej igenom fukt, kan tvättas i 95°C och tål maskintorkning upp till 50°C
- För en liggyta på 200×90 cm
- Kan desinficeras termiskt och därmed användas av ny brukare.

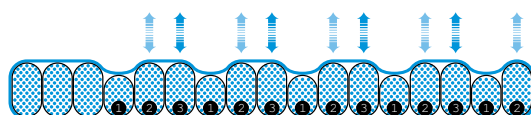

Eurovema AB

Baldersvägen 38

332 35 GISLAVED

Telefon:+46 (0) 371 390 100

Fax: +46 (0) 371 189 82

info@eurovema.se

www.eurovema.se

Teknisk information



	soft air [®] plus wds	soft air [®] plus XXL wds
Artikelnummer	110 401-wds	110 401-wds-xxl
Material	PU-nylon	
För en liggyta (i cm) på	200 × 90.	
Garanti*	2 år	
Ansluten effekt	230 V · 50 Hz/7 W	
Säkring	500 A/3A trög	
Mått (med luft) i cm	200 × 90 × 21,5 + 5	
Vikt i kg	Madrass: ca 6,5 · Aggregat: ca 1,5 · Överdrag: ca 0,9	
Rengöring	Termisk desinfektion	
Överdrag	PU-hölje, andningsaktivt, fuktavvisande, kan tvättas i 95 °C och tål maskintorkning i upp till 50 °C.	
Rekommenderad brukarvikt	30–150 kg (i liggande ställning)	XXL-variant för upp till 200 kg (i liggande ställning)
Användningsområde	Trycksårsprofylax och behandlingsstöd vid risk/grad IV (EPUAP)	