


## soft air<sup>®</sup> wds

Grad III (EPUAP)

Växeltrycksystem med stora celler för trycksårprofilax och Behandlingsstöd vid risk/grad III (EPUAP)


- För brukare som väger 30–150 kg
- Luftning enligt trekammarprincipen
- Individuellt tryck- och komfortreglage
- Möjlighet att välja mellan statiskt läge och växeltryck, vilket innebär att systemet kan användas vid olika sjukdomsbilder
- AVS (antivibrationssystem) som minimerar buller och vibrationer
- Energibesparande start/stopp-automatik
- Inställbara cykeltider
- Ljudlarm och optiskt larm
- Nyutvecklad CPR förhindrar att ventilen öppnas oavsiktligt.
- Dyna
  - med 17 celler som går att plocka ur enskilt.
  - Mikroperforerade celler för behaglig ventilering
  - tre öglor för fixering av celler.
  - kan fixeras vid sängen.
- Inklusive PU-överdrag med blixtlås runt hela, andningsaktivt, släpper ej igenom fukt, kan tvättas i 95°C och tål maskintorkning upp till 50°C
- För en liggyta på 200×90 cm (ett ytterligare madrassunderlag på 5 cm krävs)
- Specialmått går att få på begäran.
- Kan desinficeras termiskt och därmed användas av ny brukare.

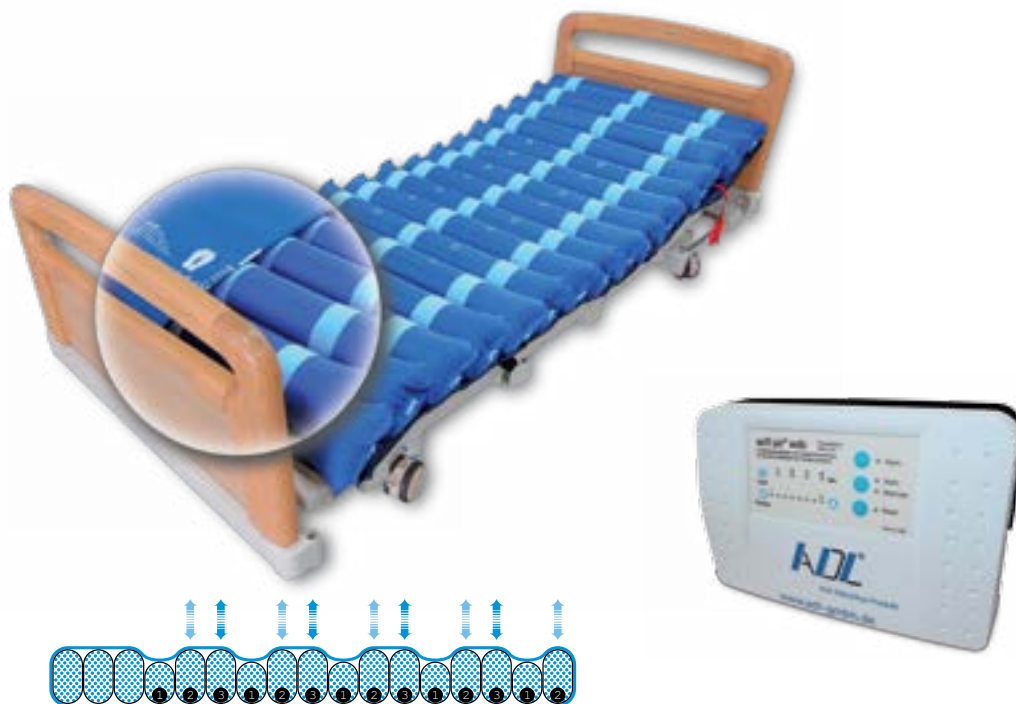

**Eurovema AB**  
 Baldersvägen 38  
 332 35 GISLAVED  
 Telefon: +46 (0) 371 390 100  
 Fax: +46 (0) 371 189 82

info@eurovema.se  
 www.eurovema.se

### Teknisk information

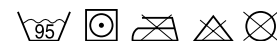

	soft air® wds
Artikelnummer	110 400-wds
Material	PU-nylon
För en liggyta (i cm) på	200×90
Garanti*	2 år
Ansluten effekt	230 V · 50 Hz/7 W
Säkring	500 A/3A trög
Mått (med luft) i cm	200×85×13,5
Vikt i kg	Madrass: ca 6,5 · Aggregat: ca 1,5 · Överdrag: ca 0,9
Rengöring	Termisk desinfektion
Överdrag	PU-hölje, andningsaktivt, fuktavvisande, kan tvättas i 95°C och tål maskintorkning i upp till 50°C.
Rekommenderad brukarvikt	30–150 kg (i liggande ställning)
Användningsområde	Trycksårprofilax och behandlingsstöd vid risk/grad III (EPUAP)