

# Euroflex Arbetstol

## Sprängskiss

Utg.003 2019-01-22

Bild nr. 1

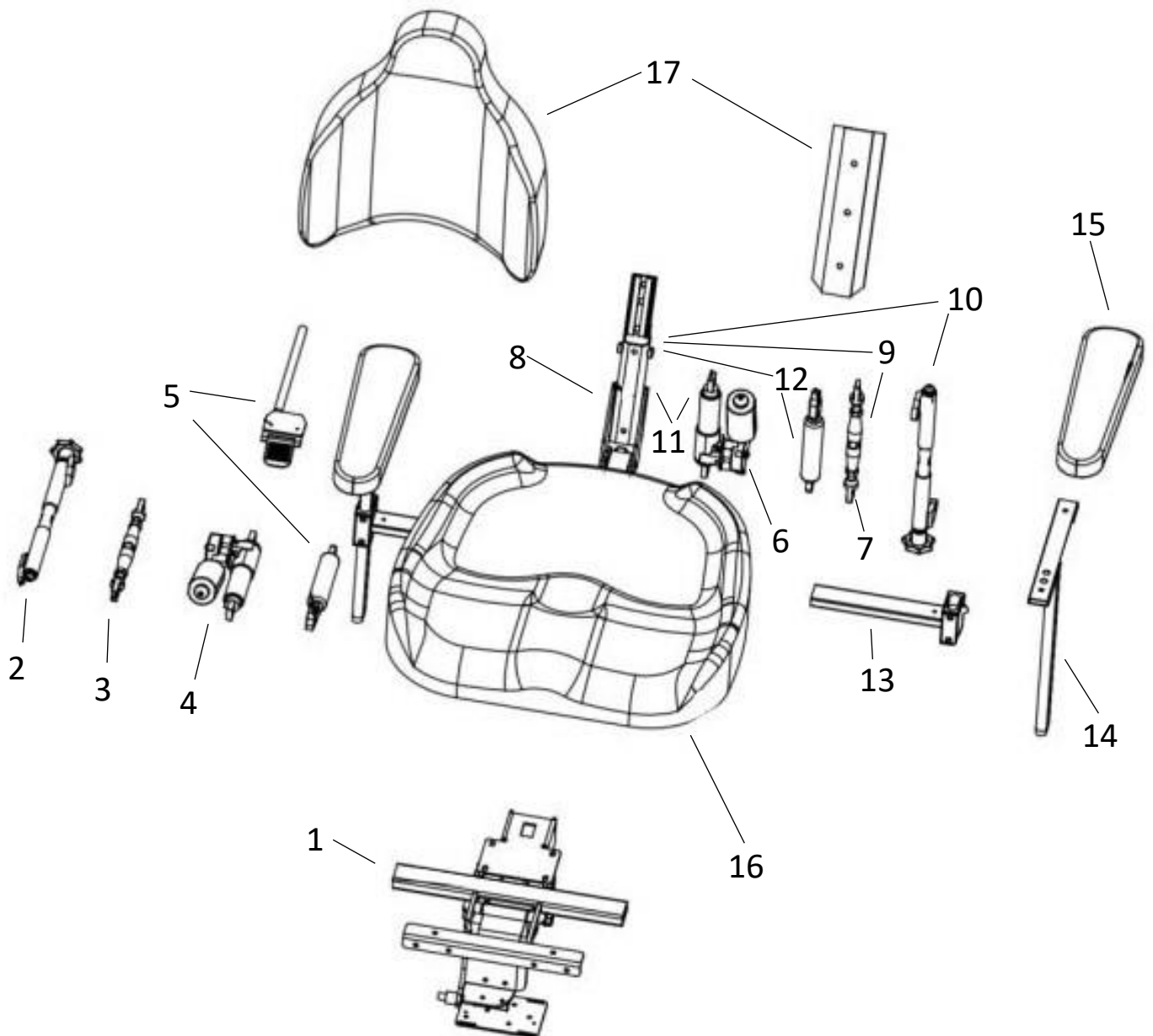


Bild 1 artikellista:

1. 800010-1950 Sittkryss Euroflex kpl.
2. 800010-1953 Tilt med vev
3. 800010-1952 Tilt manuell
4. 224102-8000 Ställdon, Nya tiltkrysset, 12V 50mm
5. 800010-1955 Tilt med gaskolv
6. 224103-8010 Ställdon Multirygg, 12V 40mm
7. 229001-6008 Ryggvinkling ryggstång manuell
8. 227001-6200 Multirygg, Komponenthanterad
9. 227001-6000 Multirygg med manuell inställning
10. 227001-6100 Multirygg med vev
11. 227002-6100 Multirygg med El-ställdon 12V
12. 227003-6000 Multirygg med gasjustering  
Se sidan 2 & 3 för mer om multirygg
13. 634001-4012 Breddjustering – Kort Standard  
624001-4012K Breddjustering Lång – för bredd 50cm
14. 624001-4010K Armstöd höjdjustering Classic
15. 624002-4004 Armstödsplatta mjuk 30x3 cm  
Fler alternativ till armstöd nedan.  
624001-4004-S Armstödsplatta mjuk 30x5cm  
624003-4004 Armstödsplatta PU 30x3cm  
624002-4007 Armstödsplatta mjuk 40x3cm  
624001-4007 Armstödsplatta mjuk 40x5cm
16. SitRite sits, olika alternativ på storlek  
624520-4040 Sits SitRite 40x40  
624520-4045 Sits SitRite 40x45  
624520-4545 Sits SitRite 45x45  
624520-4550 Sits SitRite 45x50  
624520-5050 Sits SitRite 50x50
17. SitRite Rygg, olika alternativ på storlek och tillbehör.  
Alla ryggdynor säljs med aluminiumskenan fast skruvad.  
224525-3640 Rygg SitRite 37x43  
224525-3640-B SitRite rygg 37\*43 kpl inkl. bålstödförstärkning  
224525- 3640-S SitRite rygg 37\*43 kpl inkl. Svankstöd  
224525-4245 Rygg SitRite 42x45  
224525-4245-B SitRite rygg 42\*45 kpl inkl. bålstödförstärkning  
224525-4245-S SitRite rygg 42\*45 kpl inkl. Svankstöd  
224525-4550 Rygg SitRite 47x47  
224525-4550-B SitRite rygg 47\*47 kpl inkl. bålstödförstärkning  
224525-4550-S SitRite rygg 47\*47 kpl inkl. Svankstöd

Bild nr. 2  
Multirygg  
(med manuell inställning)

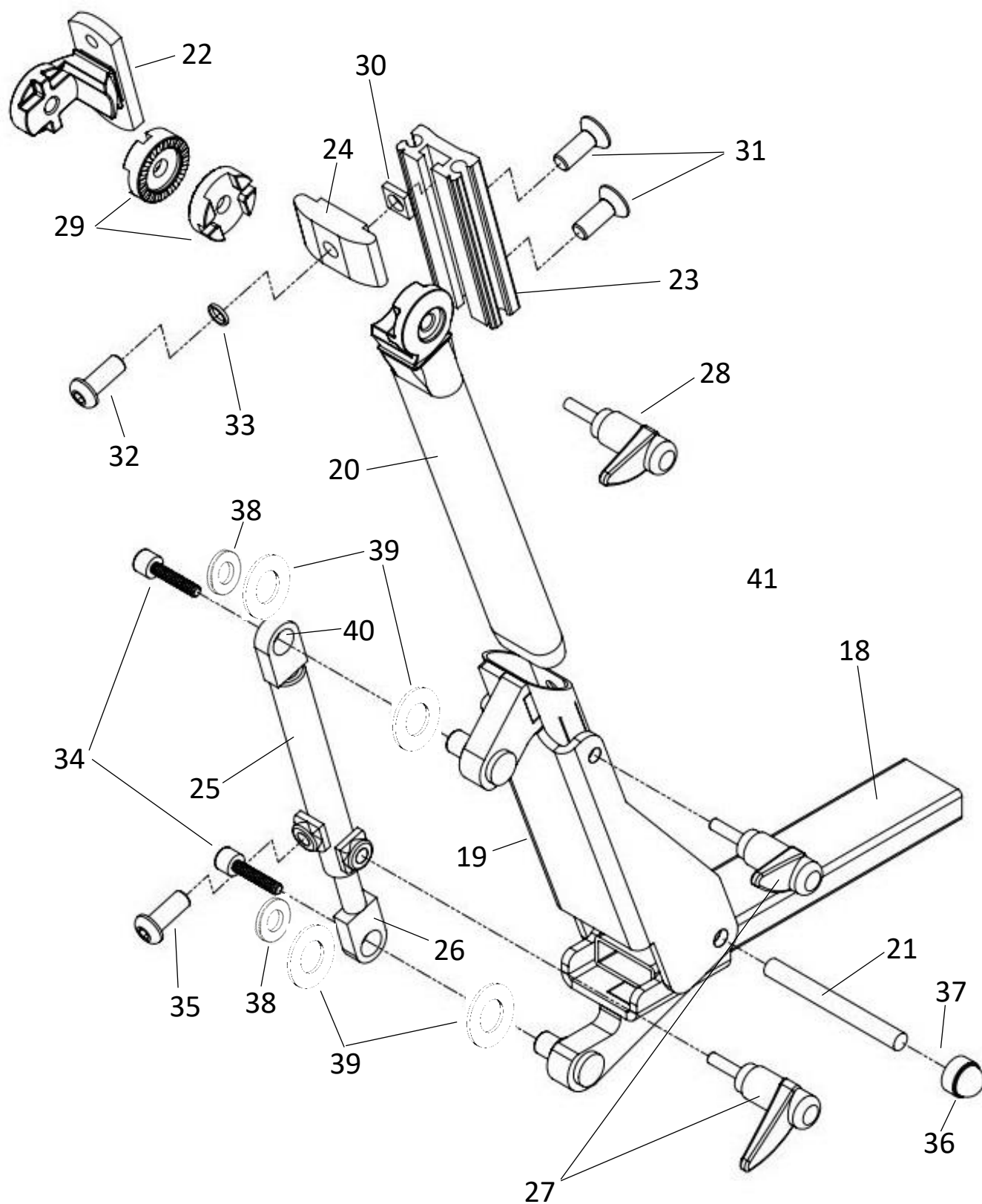


Bild 2 artikellista:

18.	SW-01985	Ryggstolpe, nedre del
19.	SW-01992	Ryggstolpe, Övre del
20.	SW-02034	Ryggstolpe Multirygg
21.	SW-01999	Pinnbult M8, Multirygg
22.	274001-6005	Profilinfästning
23.	674001-6004	Profil Ryggstolpe ABC
24.	675002-4400	AL-Profil låsklack ABC
25.	SW-01993	Justerdon, ryggstolpe
26.	SW-01997	Stång justerdon, ryggstolpe
27.	7WN5000-8*16	Låsspak WN 500 65-M8*16
28.	7MRP-63-8*30	Låsspak MRX 63p-M8*30
29.	624001-9000	Kugglås
30.	7ML4M-8	Fyrkantsmutter M8 FZB
31.	7F6S-8*22	Skruv MF6S-M8*22 FZB
32.	7K6S-8*25	Skruv K6S M8*25 Svartkrom
33.	7BRB-8,4*16 SK	Planbricka 8,4*16*1,5 Svartkrom
34.	7MC6S-5*10 LOCK	Skruv MC6S-M5*10 Fzb, LOCK-TITE
35.	7K6S-8*12	Skruv kullrig K6S M8*12 Svartkrom
36.	7KH-13-8	Mutterskydd M8
37.	7LOCKING-M8L	Låsmutter M8 DIN 985 FZB
38.	7BRB-5,3*10	Bricka 5,3*10*1 FZB
39.	7PLASTB-10,5*18	Plastbricka 10,5*18*1,0
40.	7BM-1008-FB	Dry star smörjfribussning 10*12*8
41.	2FJL-6*80E	FJ-LÅS 6*80 ENK NITAD

**Nr: 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32 =**

227004-6000

Ryggstolpe multirygg sitrite/bas

Bild nr. 3  
Flexbase underrede  
med chassimonterad broms

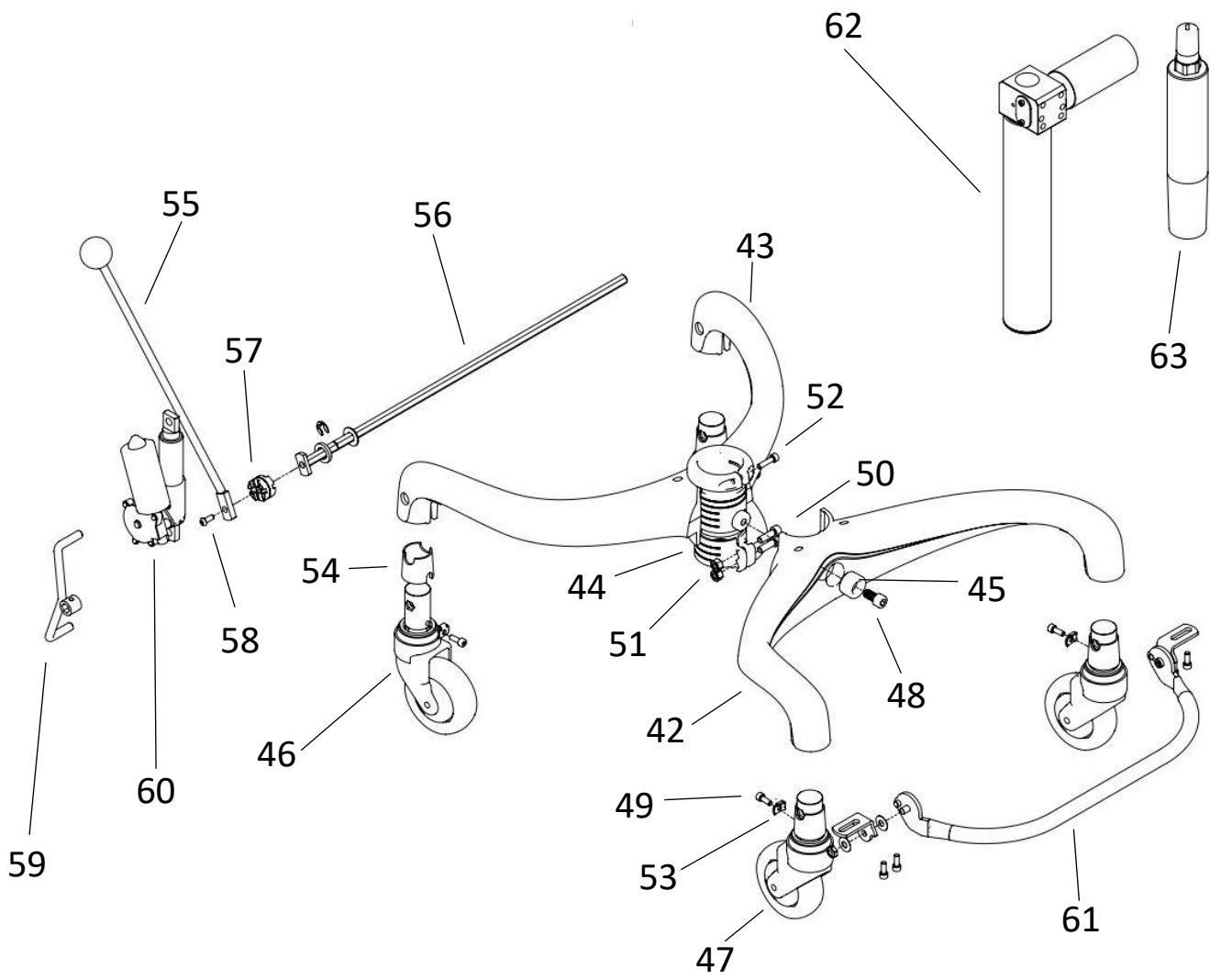


Bild nr. 4  
Flexbase underrede  
med sitsmonterad broms

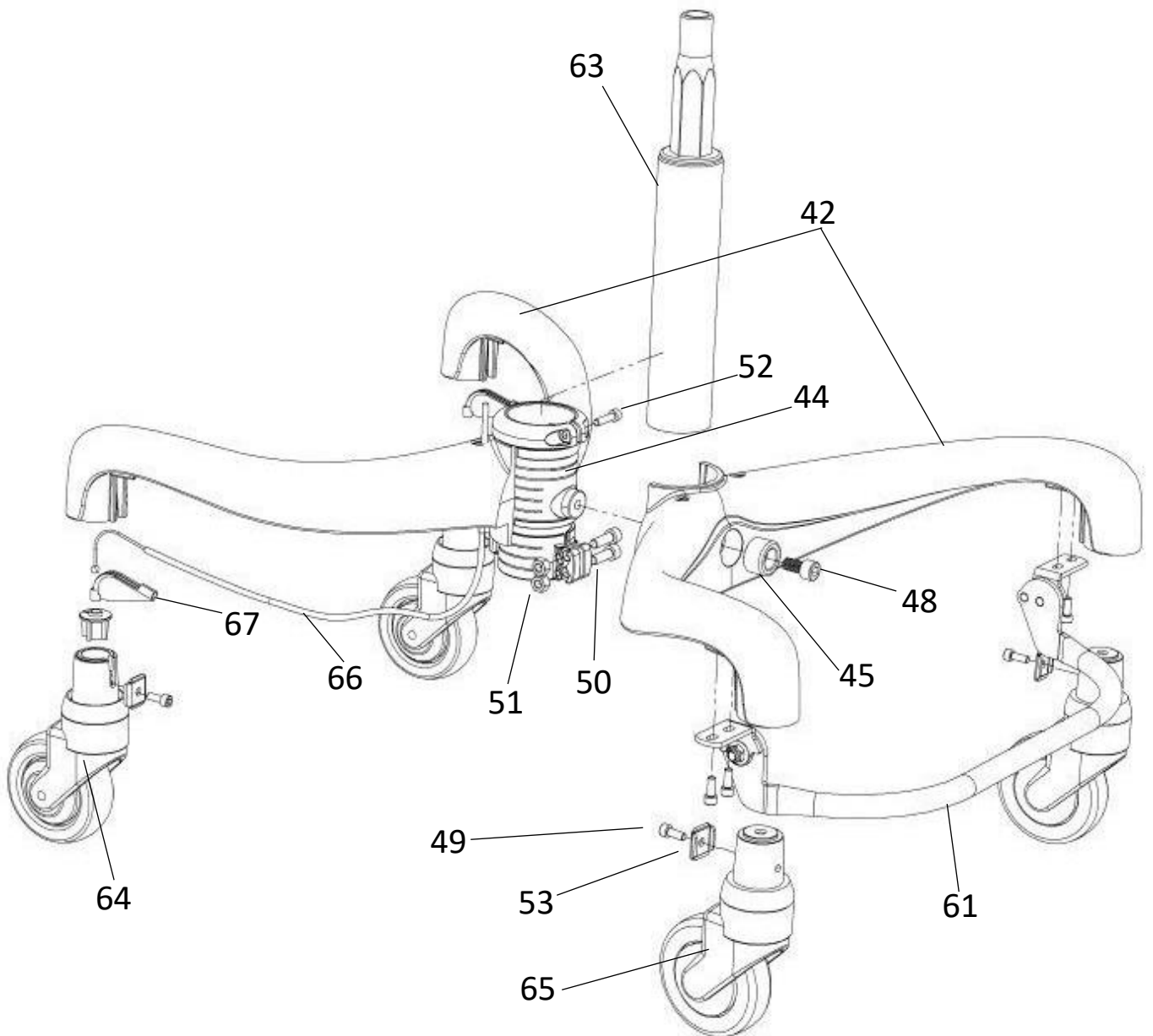


Bild 3 & 4 artikellista:

42.	SW-00405	Benhalva Forma chassi
43.	SW-00405-B	Benhalva Forma chassi Bearbetad
44.	SW-00404	Klämhylsa Forma chassi
45.	SW-00403	Bricka Forma chassi
46.	SW-00346T	Länkhjul 100mm, Centrallåst
47.	SW-00329T	Länkhjull 100mm, Obromsat
48.	7MC6S-10*22	Skruv MC6S M10*22 FZB
49.	7MC6S-6*16	Skruv MC6S M6*16
50.	7MC6S-8*25	Skruv MC6S M8*25
51.	7LOCKING-M8L	Låsmutter M8
52.	7MC6S-6*20R	Skruv MC6S M6*20 A2 Rostfri
53.	SW-01544	Låsbricka Hjul, Forma, FZB
54.	SW-01543	Styrhylsa hjul Forma chassi
55.	684001-1030	Bromsspak 200/700
56.	SW-01542	Bromsstång 6-Kant, Forma spak
57.	624001-9000	Kugglås
58.	7K6S-8*35	Skruv Kullrig K6S M8*35 Svartkrom
59.	234001-1100	Fotbromspedal Kpl. Mittmonterad
60.	800050-1000	Elbroms Forma
61.	SW-00884	Fotring Forma, Spak

Ställdon finns i två olika längder.

62.	249102-8000	Ställdon 2/3/4/700 kort D=57 Sl.180
	249101-8000	Ställdon 2/3/4/700 lång D=57 Sl.250

Gashöjning finns i 3 längder & men 3 olika Newton krafter.

63.	227220-0085	Gaskolv brukarvikt <50kg (220N)
	227220-0160	Gaskolv brukarvikt <50kg (220N)
	227220-0200	Gaskolv brukarvikt <50kg (220N)
	227320-0085	Gaskolv brukarvikt <90kg (350N)
	227320-0160	Gaskolv brukarvikt <90kg (350N)
	227320-0200	Gaskolv brukarvikt <90kg (350N)
	227450-0085	Gaskolv brukarvikt <140kg (450N)
	227450-0160	Gaskolv brukarvikt <140kg (450N)
	227450-0200	Gaskolv brukarvikt <140kg (450N)
64.	SW-00346	Hjul 100mm broms Forma
65.	SW-00329	Hjul 100mm obroms Forma
66.	SW-00410	Broms wire XLforma chassi
67.	SW-00312	Wire Guide Forma chassi

Bild nr. 5  
Bromspaket  
(till sitsmonteradbroms)

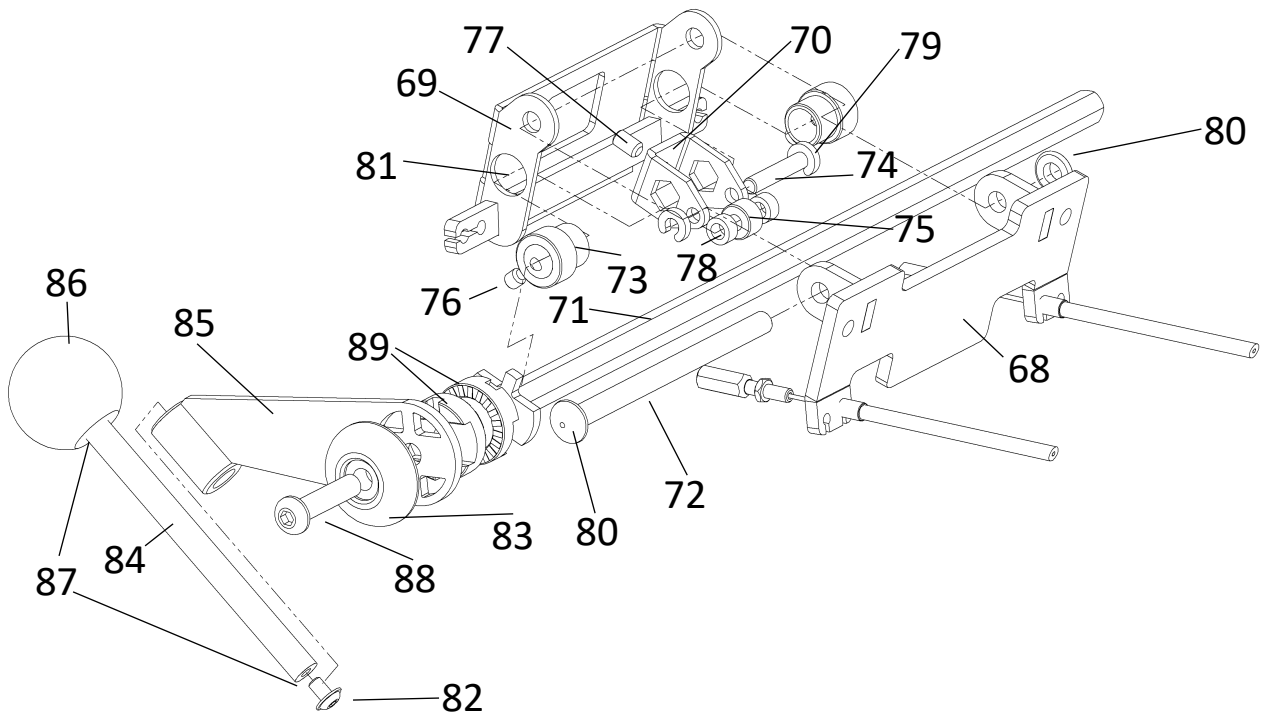


Bild 5 artikellista:

68.	SW-00840	Broms plåt fast
69.	SW-00841	Bromsplåtfäste
70.	SW-00833	Plåtsvep broms
71.	SW-00844	Broms Sexkantstång
72.	SW-00838	Broms axel
73.	SW-00836	Broms bussning
74.	SW-00839	Broms Axel 6mm
75.	604001-1032	Nållager RNAO 6*13*8
76.	7S6SS-M6*6	Stoppskruv M6*6
77.	7SK6SS-M6*10	Stoppskruv M6*10
78.	7DIST-6,2*10*5	Distans 05-6-10-5
79.	4017930147	Starlock 6*11,5
80.	76671-8	Starlock m. kapsel 8mm
81.	7SGA-16	Spårring SGA-16
82.	7MK6SF-6*12	Skruv Kullrig med fläns 6*12
83.	SW-00858	Broms Svarvad Bricka
84.	SW-00859	Bromsspak förlängare
85.	SW-00857	Bromsspak Plåt
86.	7EBK50-SOFT	Knopp Broms
87.	7O-RING-9,3*2,4	O-ring 9,3*2,4
88.	7K6S-8*30SK	Skruv M8*30
89.	624001-9000	Kugglås



Bild nr. 6  
Forma Komfort/Aktiv  
(För multirygg)

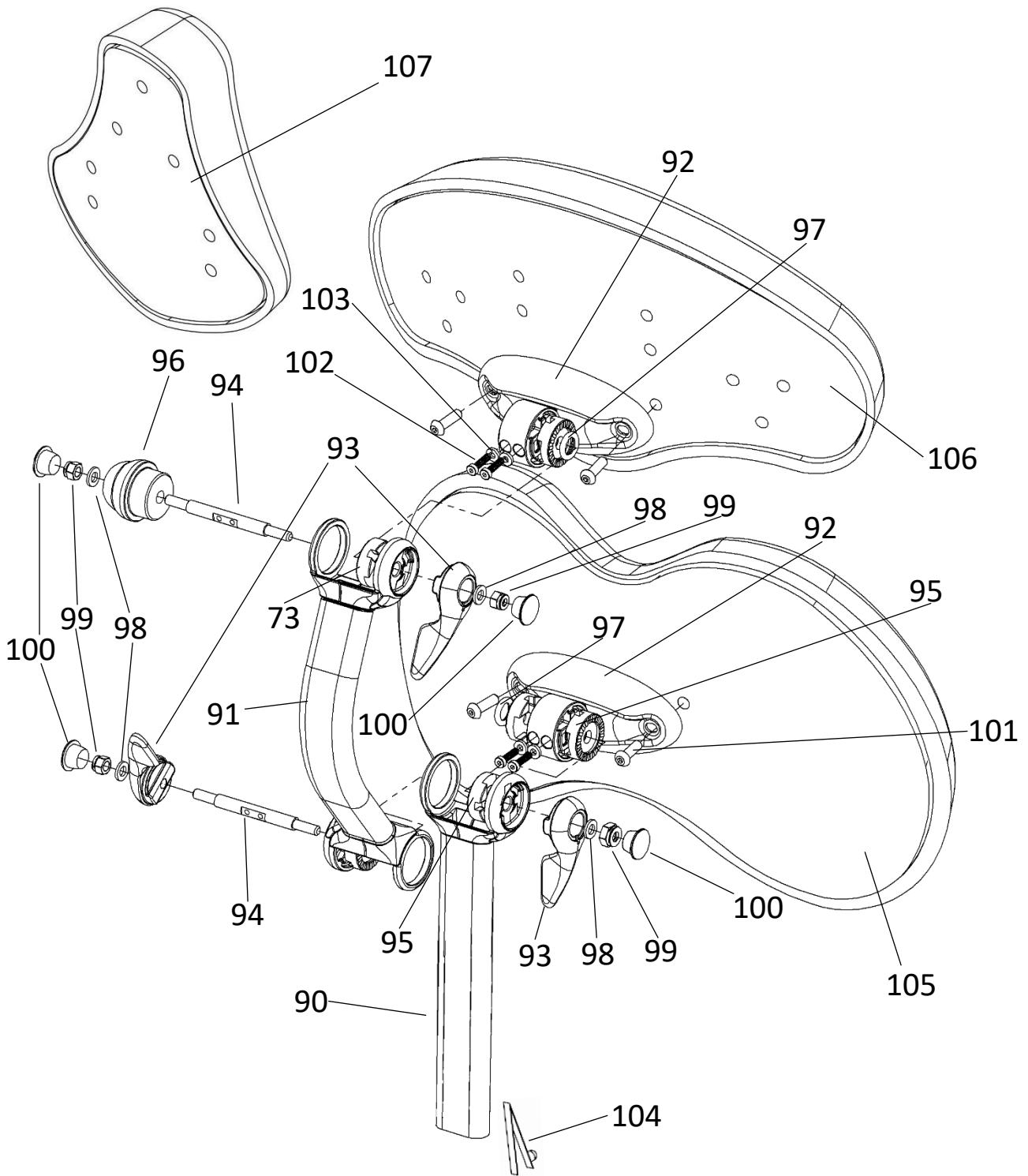


Bild 6 artikellista:

90.	SW-02087	Ryggstolpe Forma för Multirygg
91.	SW-00441	Stolpe aktiv/Komfort rygg forma
92.	SW-00435	Basplatta ryggjoint forma
93.	SW-00436	Plastspak rygglås Forma
94.	SW-00438	Axel ryggjoint forma
95.	624001-9000	Kugglås
96.	SW-00437	Blindplugg ryggjoint forma
97.	7O-RING-11x3,5	O-ring
98.	7BRB-7*14	Planbricka 7*14*1,5
99.	7LOCKING-M6H	Låsmutter M6
100.	SWED-319154	Täckpropp ryggjoint forma
101.	7K6S-6*20	Skruv Kullrig K6S M6*20 Svart
102.	7MC6S-4*16R	Skruv MC6S M4*16 Rostfri
103.	7FBB-4,1*7,6	Fjäderbricka 4,1*7,6*0,9
104.	2FJL-6*80E	FJ-LÅS 6*80
105.	801000-1003	Ryggstomme Bas
106.	803000-1001	Ryggstomme Komfort
107.	802000-1001	Ryggstomme Aktiv

Bild nr. 7  
Forma Bas  
(För multirygg)

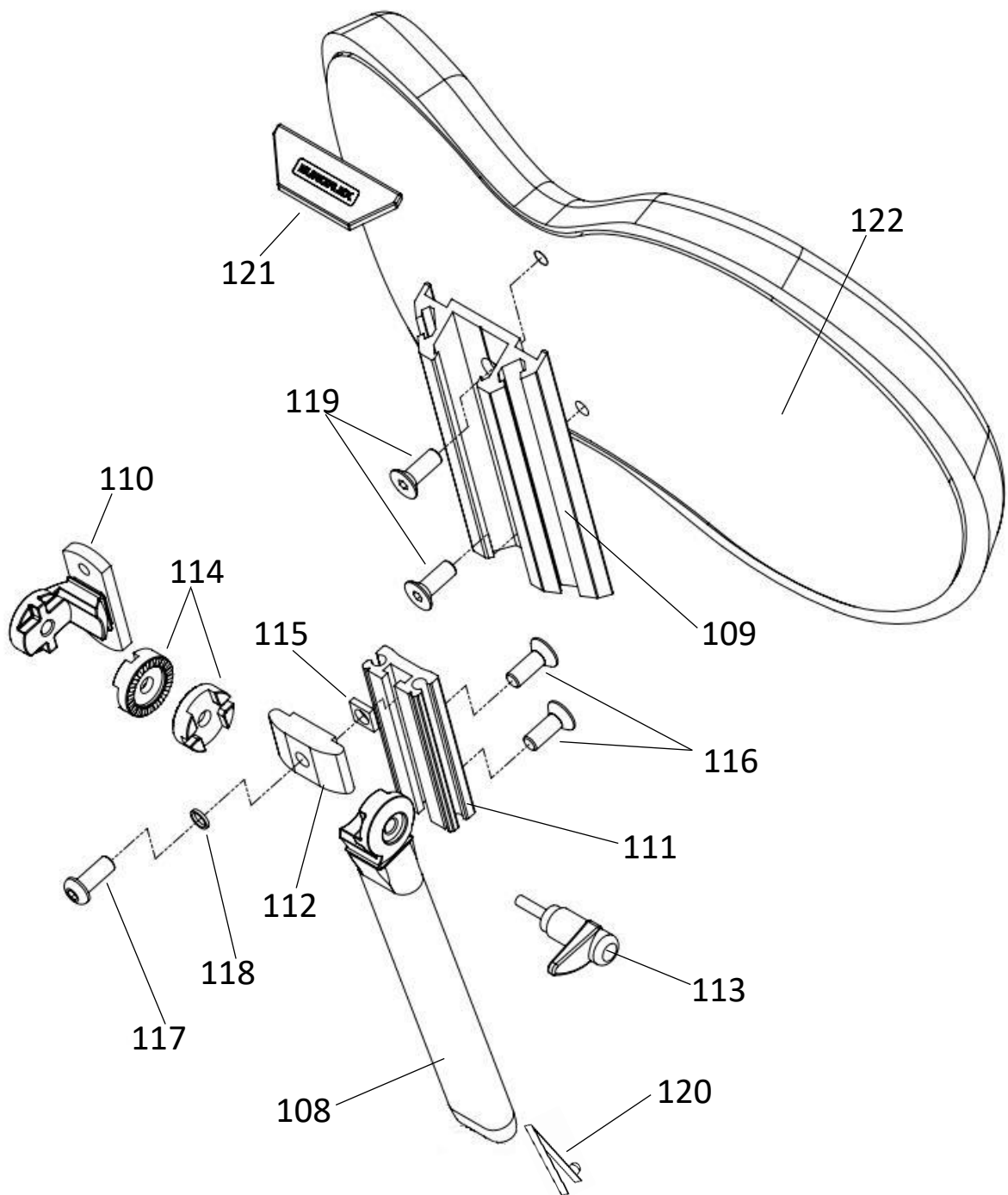


Bild 7 artikellista:

108.	SW-02034	Ryggstolpe Multirygg
109.	SW-01516	Ryggprofil Basrygg
110.	274001-6005	Profilinfastning
111.	674001-6004	Profil Ryggstolpe ABC
112.	675002-4400	AL-Profil låsklack ABC
113.	7MRP-63-8*30	Låsspak MRX 63p-M8*30
114.	624001-9000	Kugglås
115.	7ML4M-8	Fyrkantsmutter M8 FZB
116.	7F6S-8*22	Skruv MF6S-M8*22 FZB
117.	7K6S-8*25	Skruv K6S M8*25 Svartkrom
118.	7BRB-8,4*16 SK	Planbricka 8,4*16*1,5 Svartkrom
119.	7F6S-6*14	Skruv MF6S-6*14
120.	2FJL-6*80E	FJ-LÅS 6*80 ENK NITAD
121.	SW-01502	Cover Al-profil, ABC, SitRite
122.	801000-1003	Ryggstomme Bas

Bild nr. 8  
SitRite  
(För multirygg)

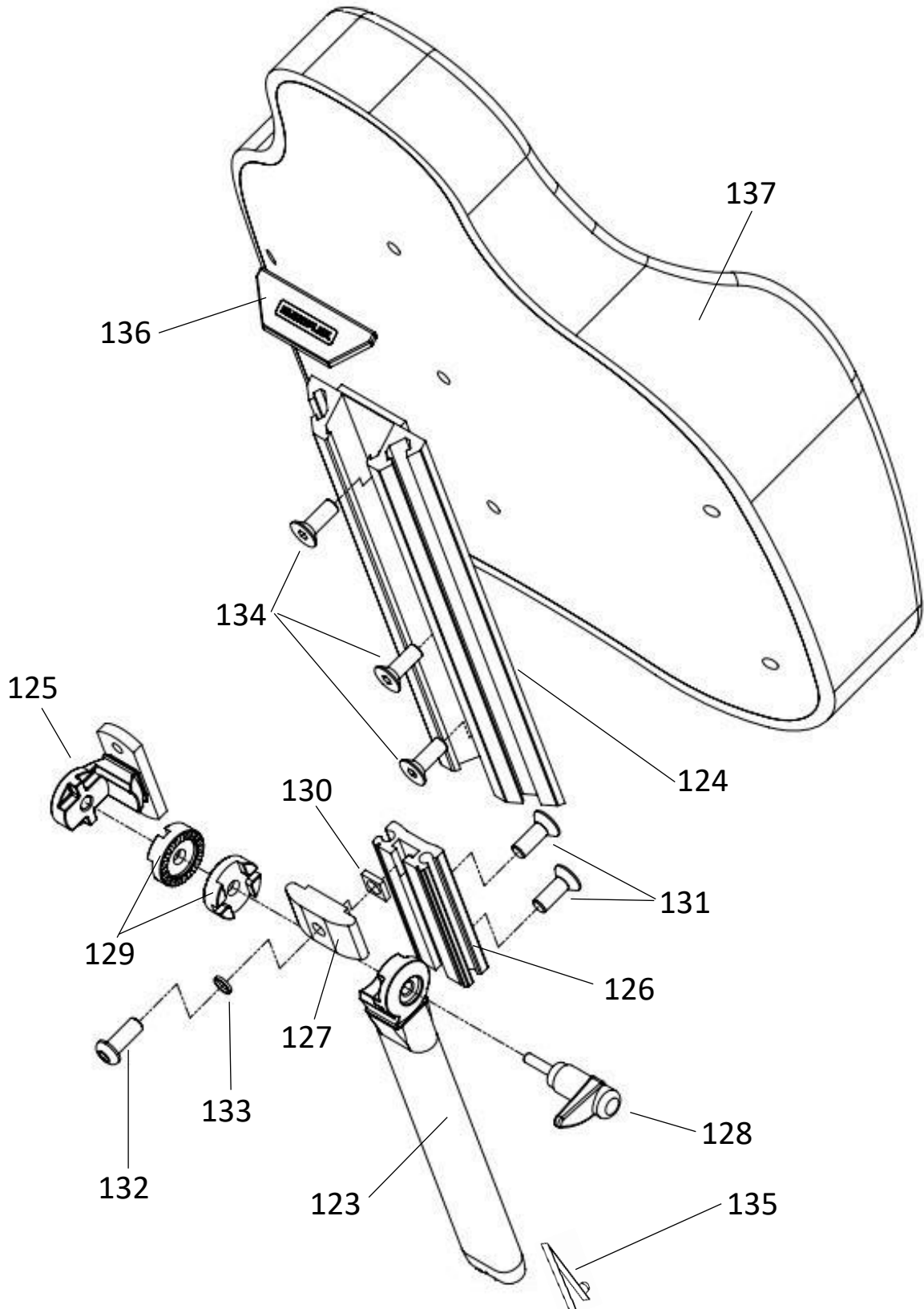


Bild 8 artikellista:

123.	SW-02034	Ryggstolpe Multirygg
124.	674001-6001	Ryggprofil ABC Hög 280mm
125.	274001-6005	Profilinfastning
126.	674001-6004	Profil Ryggstolpe ABC
127.	675002-4400	AL-Profil låsklack ABC
128.	7MRP-63-8*30	Låsspak MRX 63p-M8*30
129.	624001-9000	Kugglås
130.	7ML4M-8	Fyrkantsmutter M8 FZB
131.	7F6S-8*22	Skruv MF6S-M8*22 FZB
132.	7K6S-8*25	Skruv K6S M8*25 Svartkrom
133.	7BRB-8,4*16 SK	Planbricka 8,4*16*1,5 Svartkrom
134.	7F6S-6*14	Skruv MF6S-6*14
135.	2FJL-6*80E	FJ-LÅS 6*80 ENK NITAD
136.	SW-01502	Cover Al-profil, ABC, SitRite
137.	624525-3640	Ryggstomme SitRite 36*40 cm
	624525-4245	Ryggstomme SitRite 42*45 cm
	624525-5050	Ryggstomme SitRite 50*50 cm



# **Eurovema**

Creates mobility and ergonomics.

## **Eurovema Mobility AB**

Besöksadress: Baldersvägen 38  
332 35 Gislaved  
Sverige

Telefon: +46(0)371-39 01 00  
Fax: +46(0)371-189 82  
E-post: [info@eurovema.se](mailto:info@eurovema.se)