


Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

Euroflex Classic

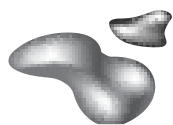

EUROFLEX®

CE

Rev: 201409|7



Classic – Workchair - innovation design och flexibilitet.

Euroflex Forma. En arbetsstol i Forma serien med Forma sitssystem. Flexbase® underrede i gjuten aluminium med extra stort utrymme i chassi för att underlätta förflyttning sittande i stolen.

Flexbase chassi är standard, vilket gör att stolen alltid står stadigt på ojämna underlag och när man sätter sig och stiger ur stolen. De flexibla inställningarna och det stora tillbehörsprogrammet gör det enklare att skapa en välfungerande arbetsstol efter den enskildes behov. Stolen är modul uppbyggd och kan kombineras i en mängd olika konfigurationer



Manuell sittvinkling, standard



Handbroms, bromsspak standard



Låsbar rygg

Grundutförande:

- Flexbase chassi, 100 mm hjul
- Sittsystem Forma
- Fasta mjuka armstöd
- Sittplatta 45x45 cm, svart Atlantic
- Rygg - 37x23 cm, låg, låsbar, svart Atlantic
- Sitslyft - gas/el
- Centrallåsta - manuell broms
- Sitsvinkling - manuell

Tillbehör: (ett urval)

- Broms - alternativa bromsar finns
- Sitslyft - elektrisk/gas
- Sittplatta 40x40, 40x45, 45x45, 50x50, coxit 45x45
- Rygg - hög; 35x44, 40x44 cm
- Rygg - låg; 37x23 cm
- Rygg - slingback
- Elrygg
- Nackstöd - hög rygg
- Bålstöd - hög rygg
- Lårstöd
- Armstöd - mjuka 30 cm, 40 cm, hemiplegi
- Armstöd - fällbara
- Grenkil
- Elbroms
- Överdrag - sits och rygg - inkontinensskyddade
- Bord
- Fotplatta, fotring
- Delade benstöd - manuella eller elektriska
- Körhandtag - för vårdare

Teknisk data:

Klass
Sitsstorlekar, BxD
Sittdjup
Sithöjd, gas

Sithöjd, el

Ryggstöd, storlek, BxH

Ryggstödhöjd

Armstöd, höjd

Armstöd, platta, storlek

Sitsvinkling, manuell, framåt

Totallängd - chassi

Totalbredd - chassi

Totalvikt

Max brukarvikt

Batteri - elstol

Klädsel, färger

Ställdonets läge i chassit är inställbart genom att lossa ett skruvförband, vilket påverkar högsta och lägsta sithöjd. Läget går att justera nedåt ca 3cm och uppåt 10 cm, detta gäller endast elektriskt ställdon.

Steglöst inställbar

Arbetsstol - ISO 180903

45x45 cm

37-49 cm, ställbart

44-60 - std +5 cm

42-50 - kort +2 cm

49-69 - lång +5 cm

45-62 cm +3 cm- kort

50-75 cm +3 cm- lång

37x23, 35x44 cm

37-54 cm, ställbart

0-26 cm, ställbart

30x10x5 cm, mjuka

15° till -15° bakåt

56 cm

53 cm

20 kg - gas, 28 kg - el

140 kg

12V/3A - 1st/stol

svart atlantic

Eurovema

Creates mobility and ergonomics.

Baldersvägen 38, SE-332 35 Gislaved, Sverige | Tel. +46 371 390 100 | Fax. +46 371 189 82
info@eurovema.se | www.eurovema.se



Rev: 201409|7