


arsos[®] light med dexos[®] Plus

Tryckavlastningssystem med växeltryck och stora celler för trycksårsprofylax och behandlingsstöd vid risk/grad IV (EPUAP). Unik, patentskyddad konstruktion med celler som innehåller både luft och skum.

- Är lämplig för bruk vid smärtbehandling.
- För brukare som väger 40–180 kg
- Pumpaggregat dexos[®] plus
- Luftning enligt trekammarprincipen
- Individuell tryckreglering
- Möjlighet att välja mellan statiskt läge och växeltryck, vilket innebär att systemet kan användas vid olika sjukdomsbilder
- AVS (antivibrationssystem) som minimerar buller och vibrationer
- Energibesparande start/stopp-automatik
- Inställbara cykeltider
- Ljudlarm och optiskt larm
- Matratze arsos[®] light
 - Tio PU-celler som går att plocka ur enskilt, med integrerad kärna av PU-skumplast med förstärkt kant.
 - Dynan har en nyutvecklade CPR som förhindrar att ventilen öppnas oavsiktligt.
 - Inkl. PU-madrassöverdrag av hög kvalitet, andningsaktivt, fuktavvisande, kan tvättas i 95°C och tål maskintorkning i upp till 50°C.
 - Kan desinficeras termiskt och därmed användas av ny brukare.
- Transportväska ingår.

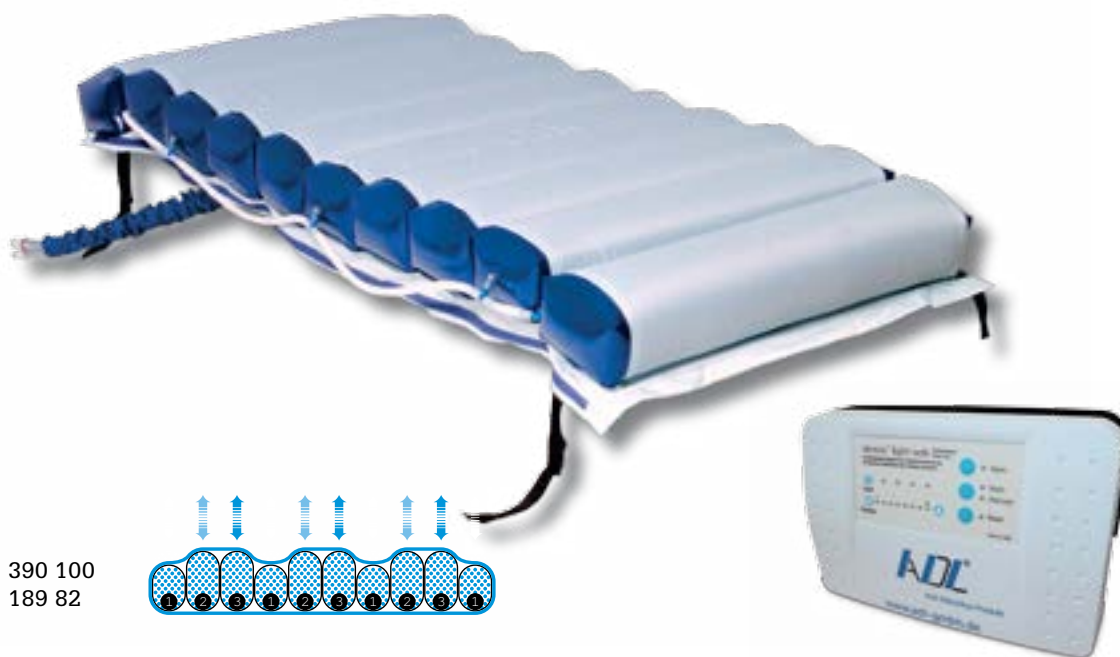

Eurovema AB

Baldersvägen 38


332 35 GISLAVED

Telefon:+46 (0) 371 390 100

Fax: +46 (0) 371 189 82

info@eurovema.se

www.eurovema.se

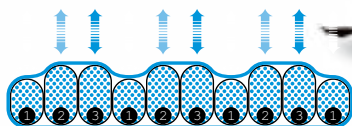

Teknisk information



	air foam hybridssystem · arsos [®] light med dexos [®] Plus
Artikelnummer	111 500-DL-auto
Material	Madrass: Polyuretan · Aggregat: plasthölje
För en liggyta (i cm) på	200 × 90.
Garanti*	2 år
Ansluten effekt	230 V · 50 Hz/7 W
Säkring	500 A/3A trög
Mått (med luft) i cm	200 × 90 × 12
Vikt i kg	Madrass: ca 13,0 · Aggregat: ca 1,5 · Överdrag: ca 0,9
Rengöring	Termisk desinfektion
Överdrag	PU-hölje, andningsaktiv, fuktavvisande, kan tvättas i 95 °C och tål maskintorkning i upp till 50 °C.
Rekommenderad brukarvikt	40–180 kg (i liggande ställning)
Användningsområde	Trycksårsprofylax och behandlingsstöd vid risk/grad IV (EPUAP)