


## soft air<sup>®</sup> simplex wds

Grad II (EPUAP)

Växeltrycksystem med stora celler för trycksårsprofylax och behandlingsstöd vid risk/grad II (EPUAP)

- För brukare som väger 40–130 kg
- Luftning enligt tvåkammarsprincipen
- Individuellt ställbart reglage
- Det går att välja mellan statiskt läge och växeltryck, vilket innebär att enheten kan användas vid olika sjukdomsbilder
- AVS (antivibrationssystem) som minimerar buller och vibrationer
- Nyutvecklad CPR förhindrar att ventilen öppnas oavsiktligt
- Madrassbotten - med 21 celler som går att plocka ur enskilt
  - Tre öglor för fixering av celler
  - Kan fixeras vid sängen
- Inklusive PU-hölje med blixtlås runt hela, andningsaktiv, släpper ej igenom fukt, kan tvättas i 95°C och tål maskintorkning i upp till 50°C
- En liggyta på 200×90 cm (ett ytterligare madrassunderlag på 5 cm krävs)
- Kan desinficeras termiskt och därmed användas av ny brukare

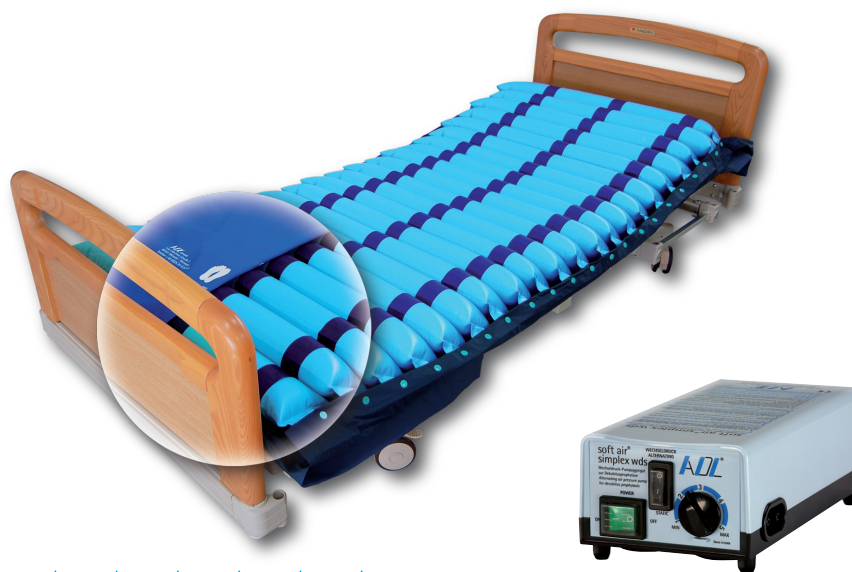

Eurovema AB

Baldersvägen 38


332 35 GISLAVED

Telefon:+46 (0) 371 390 100

Fax: +46 (0) 371 189 82

info@eurovema.se

www.eurovema.se

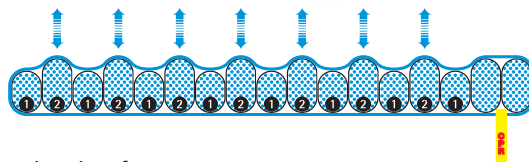

### Teknisk information



	soft air® simplex wds
Artikelnummer	110 470-wds
Material	Polyvinylklorid
För en liggyta (i cm) på	200 × 90.
Garanti*	2 år
Ansluten effekt	220–240 V · 50–60 Hz/7 W
Säkring	500 A/3A trög
Mått (med luft) i cm	196 × 88 × 12,5
Vikt i kg	Madrass: ca 4,5 · Aggregat: ca 1,3 · Överdrag: ca 0,9
Rengöring	Termisk desinfektion
Överdrag	PU-hölje, andningsaktiv, fuktavvisande, kan tvättas i 95 °C och tål maskintorkning i upp till 50 °C.
Rekommenderad brukarvikt	40–130 kg (i liggande ställning)
Användningsområde	Trycksårsprofylax och behandlingsstöd vid risk/grad II (European Pressure Ulcer Advisory Panel, EPUAP)